

Шефская помощь «ВладМиВа»

**Издание: Научно-практические труды
Материалы IX международной научно-практической конференции.
Стоматология славянских государств. Белгород 2016**

**Половнева Л.В., Чуев В.П., Копытов А.А.
ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ «ВЛАДМИВЫ»**

*ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа», Белгород
ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный
национальный исследовательский университет*

В настоящее время огромное значение уделяется красоте и здоровью. Быть красивым и здоровым стало престижно. И, как правило, красивая улыбка – это результат кропотливой и грамотной работы врачей-стоматологов.


Ежедневно врачу-стоматологу приходится делать выбор из широкого спектра – стоматологических боров, применять именно тот, чья работа минимизирует травму твёрдых тканей и экономит время. Быстрое препарирование снижает стрессорное воздействие на пациента, ускоряет лечение и в целом повышает его эффективность. Например, боры с большим размером алмазного зерна эффективны для быстрого удаления массива твёрдых тканей зубов. Для более тонкой “ювелирной” работы: придания формы реставрации, полировки или обработки поверхности зуба, применяются боры с мелким размером алмазных зерен. Т.е. наличие у фирмы производителя алмазных зёрен различной величины, обеспечивает возможность врачу комплектовать, для каждого клинического случая, оптимальный набор типоразмеров вращающегося режущего инструмента. При этом, во время учёбы в вузе комплексный подход к выбору алмазных боров для той или иной работы не преподаётся

В настоящее время на стоматологическом рынке представлено огромное разнообразие стоматологического инструмента Российских и зарубежных производителей различной ценовой категории. Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа» поставляет на рынки Российской Федерации и зарубежных стран широкий перечень типоразмеров боров с различной величиной алмазных зерен. Изучая соотношение цена-качество стоматологических боров и отзывы практикующих врачей стоматологов, можно сделать вывод, что фирма «ВладМиВа» занимает достойное место среди отечественных и зарубежных производителей. Алмазные боры “РосБел” с успехом продаются в более 60 стран мира. Эта возможность обуславливается доступной ценой и высокой износостойкостью, не уступающей зарубежным аналогам.

В производстве стоматологических боров “РосБел”, в качестве абразивного зерна используется натуральный алмаз. По минералогической шкале твердости Мооса алмаз является эталоном твердости (10 баллов из 10 возможных). Особо высокую твердость придает ему кубическая форма кристаллической решетки. В процессе работы стоматологическим бором с натуральным алмазом на кромке грани алмазного зерна происходит микроскалывание, которое создает новую режущую грань. В результате инструмент обладает свойством самозатачивания, что продлевает срок службы инструмента. Алмазное покрытие головки боров создается методом гальванопластики в не-

сколько слоев, что обеспечивает плотность укладки алмазных зерен и тем самым повышаются режущие свойства рабочей части.

Маркетинговые, научные исследования и оценка менеджерами отзывов потребителей, стимулируют производство к разработке новых форм стоматологического вращающегося инструмента. Одной из таких разработок является внедрение в производство выпуск алмазных боров с зерном, нанесенным по спирали (торнадо). При использовании данного бора сокращается время препарирования дентина и эмали зуба в 2,5-3 раза. Стоматологический бор торнадо имеет острые кромки канавок, которые обуславливают охлаждение бора и удаление шлама, что создает дополнительный режущий эффект и увеличивает его износостойкость. Не смотря на то, что интенсивность работы бора торнадо выше, чем обычного гальванического бора, температура обрабатываемой поверхности, при использовании охлаждения водой, не отличается от температуры самой воды.

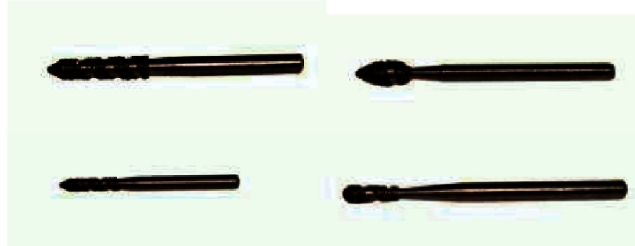

Разнообразие форм стоматологических боров «РосБел» (более 400 рабочих форм) способны удовлетворить потребность в выполнении любой клинической задачи, замесив более дорогой импортный продукт, а тем самым снизив стоимость оказываемых стоматологами услуг. Еще до того как политика страны обозначила линию импортозамещения, технологи опытно-экспериментального завода «ВладМиВа» постоянно совершенствовали технологии и качество выпускаемой продукции.

Одним из путей повышения стоматологической помощи является подготовка специалистов высокой квалификации. Понимая настоящие экономические сложности системы высшего образования, фирма «ВладМиВа», выступила с инициативой обеспечения стоматологического факультета НИУ «БелГУ» алмазными борами. При этом решается вопрос предоставления учащимся наборов боров, с помощью которых можно проводить препарирование кариозных полостей и обработку зубов под несъемные конструкции.

Для обеспечения этой возможности в 2011 году ОЭЗ «ВладМиВа» успешно прошел сертификацию производства на соответствие системы менеджмента качества требованиям международного стандарта ISO13485:2003. В настоящее время получен сертификат на соответствие Директивы 93/42 ЕЕС на «Боры стоматологические с алмазными головками «РосБел» и на «Диски стоматологические алмазные», что дает право маркировать продукцию знаком европейского соответствия CE и является показателем соответствия продукции международным стандартам качества. 1 июня 2015 года

Минпромторг опубликовал "Перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли", куда вошел Опытно-экспериментальный завод «ВладМиВа». Это признание говорит о значимости и востребованности работы завода «ВладМиВа».